

电动牙刷 EHS318

使用说明书



目录

前言	1
安全注意事项及产品结构	2
使用说明	3-5
产品规格及故障排除	6
维护保养及产品环保信息	7
保修规定及保修卡	8

前言

- 此产品仅限用于说明书中描述的用途，切勿用于除牙齿护理以外的其他用途。
- 确保产品放在儿童不能触及处。
- 肢体不健全、感觉或精神上有障碍、或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）等，请在监护人指导下使用。
- 如果您在前2个月中曾做过口腔或牙龈手术，请在使用产品前先咨询您的牙医。
- 切勿大力将刷毛压在牙齿或牙龈上，也不能长时间刷同一个位置。
- 切勿使用稀释剂、苯或酒精来清洁牙刷，以免引起零部件故障、开裂或变色等问题。
- 请使用手指头部来按压按钮，用手指甲会损坏按钮保护皮。
- 切勿自行拆卸、修改或维修，否则易引发意外或麻烦。
- 谨防跌落或粗暴使用牙刷。


	注意！查阅随机文件
	一般指示
	禁止
	禁止分解
	包装材料的回收标志

- 感谢您购买本公司的电动牙刷。
- 在使用本产品之前，请仔细阅读本产品使用说明书。
- 本说明书兼保修卡使用，请妥善保管。

安全注意事项

为了防止产品在使用过程中对您和他人造成伤害或财产损失，以及保持产品长期的良好性能，使用时请务必遵守下列事项。


关于产品的使用安全

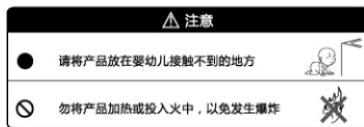

▲ 注意事项

1. 请勿私自对产品进行拆卸、修理、改造等；
2. 儿童或缺乏相关经验的人请在指导下使用；
3. 请勿将产品长时间浸泡在水中；
4. 产品长时间不用时将电池取出；
5. 不能使用超出产品本身的功能范围；
6. 只适合个人家庭使用，请勿用在工业等用途；
7. 在刷牙过程中，请利用牙刷自身震动力，勿对牙齿过度用力挤压；
8. 请勿将产品放在高温、阳光直射的地方；
9. 请勿敲击或撞击产品。

■ 产品结构

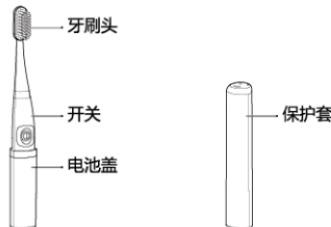


- 初次使用前，请确认以下物品均已齐全

 1. 电动牙刷 EHS318
 2. 使用说明书


■ 使用说明

● 保护盖打开/合上

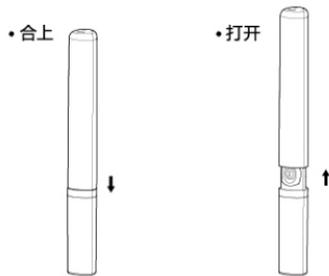

● 牙刷头更换方法

• 取下

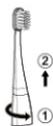

将牙刷头按 ① 的方向拧开，按 ② 的步骤向上拔出。




将新的牙刷头按 ① 的步骤对齐，按 ② 的方向拧紧。



※ 注意：安装牙刷头时，注意定位槽与凸点的位置。

■ 使用说明

● 电池更换方法

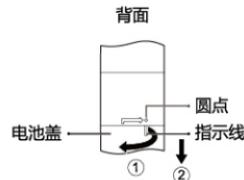

1. 将电池盖按 ① 的方向拧开至指示线对齐。
2. 按 ② 的步骤向下拔出，按正负极方向，放入一节7号电池。

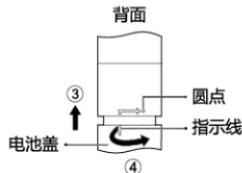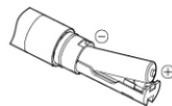

3. 将电池盖按 ③ 的步骤装上，此时指示线应与箭头底部对齐。
4. 按 ④ 的方向拧紧，此时指示线应与圆点对齐。


■ 使用说明

● 使用方法

1. 沾湿刷毛并挤上适量牙膏。
2. 将刷毛以小角度对准牙龈线放在牙齿上。
3. 按开/关按键打开电动牙刷。
4. 为了最大限度地发挥电动牙刷的作用，应轻轻的施加一点压力。
(力度为普通牙刷力度的1/6左右)
5. 在使用过程中应轻柔地将刷头在牙齿间来回小幅度缓慢移动，并确保在口腔4个区域中的每个区域刷牙时间达到30秒以上，以便刷毛能清洁牙缝。在整个刷牙周期中连续这样移动即可。
6. 刷牙工作完成后，应先关闭电动牙刷，然后将牙刷从口腔中拿出。



开关

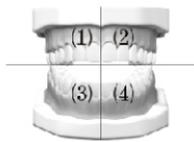

将口腔分为4个区域

- ※ 用手指按下开关按钮，电动牙刷启动，开始工作，再按下则停止工作。

■ 产品规格

项 目	参 数
产品名称	电动牙刷
型 号	EHS318
产品尺寸	20mm x 20mm x 172mm
重 量	33g
额定电压	DC 1.5V
额定功率	0.26W
电 源	1节7号电池
震动频率	22000次/分钟
电池寿命	约120天(碱性电池,每天两次,每次两分钟)
使用环境	0~50℃
材 质	杜邦尼龙 / ABS / TPE
公称丝径	尖丝径: $\varnothing 0.152\text{mm}$

上述规格若因性能改进而发生变更，恕不另行通知。

■ 故障排除

原因	措施
产品不工作	如果更换电池仍然不正常工作，请联系售后服务中心。
产品工作不顺畅	

■ 维护保养

1. 使用前，请先将刷毛用清水清洗，并将电池保护底盖旋紧固定。
2. 使用后，请将牙刷用清水冲洗干净，并放置在通风干燥处。
3. 为达到最佳清洁效果，建议每三个月更换一次刷头(更换时间可根据牙刷使用频率和使用方法而变)。
4. 如果产品有损坏迹象，请尽快更换。

■ 产品环保信息

1. 有害物质名称及含量状况

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

2. 电子电气产品有害物质限制使用标志

本产品的环保使用期限标识为：。标识中央的箭头围住的数字为环保使用年限，表示环保使用期限是10年。

本产品的生产日期请见产品铭牌。

请遵守关于该产品的安全或使用上的注意事项，从生产日期算起的该年限内正常使用不会对环境造成严重污染或对用户人身、财产造成严重损害。

■ 保修规定及保修卡

● 保修规定

即使在保修期间内，但出现以下状况均需客户承担修理费用。

- ① 由于错误使用或拿取导致的故障或损伤。
 - ② 由于保管不当或由于使用这责任导致的故障或损伤。
 - ③ 由于火灾、地震、水灾、异常电压、使用指定电源之外电源或其他天灾地变或撞击导致的故障或损伤。
 - ④ 保修卡里面没有提到的保修范围。
 - ⑤ 保修卡上面写的获赠日、保修期限等写得不够详细或有被修改过的痕迹。
 - ⑥ 使用后的外装面有伤、破损或需要对外装部品、附带品进行更换时。
- ※ 在把产品带到指定维修中心进行修理时所产生的各种费用均由客户承担。

- 本保修单只发行一次，请妥善保管。

保修卡

CITIZEN

非常感谢您购买本公司的电动牙刷。在您按照使用说明书正确使用本产品的期间，如果发生故障而又在保修期内，请带上本保修卡和产品到指定维修中心，进行修理和调整。※在修理期间如有需要，保修员有可能会写上相关信息在保修卡上。

产品名称	电动牙刷	
型号	EHS318	产品编号/批号
客户姓名	电话	
住址		
获赠日	年 月 日	
保修期限	自获赠日起一年	

售后服务中心：鑫爵贸易（上海）有限公司
 售后服务地址：上海市长宁区中山西路1055号A座7楼701室
 售后服务热线：400-921-7778
 服务时间：周一至周五（9:30-12:00;13:30-17:00），
 节假日除外。
 CITIZEN（西铁城）是西铁城时计株式会社的注册商标。

委托生产企业：西铁城精电科技(江门)有限公司
 地址：广东省江门市江海区金星路399号6栋
 经销商：鑫爵贸易（上海）有限公司
 经销商地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路755
 弄1~7号9幢3楼K-6

产品执行标准号：Q/EHS 004-2019

CITIZEN（西铁城）是西铁城时计株式会社的注册商标。



纸