

CITIZEN

电动牙刷
EHS520
使用说明书

CITIZEN

委托生产企业：**西铁城精电科技（江门）有限公司**

地址：广东省江门市江海区金星路399号6栋

经销商：鑫爵贸易（上海）有限公司

经销商地址：上海市松江区石湖荡镇长塔路755弄1~7号9幢3楼K-6

电动牙刷产品执行标准号：Q/EHS 004-2019

牙刷消毒器产品执行标准号：Q/EHS 001-2019

CITIZEN（西铁城）是西铁城時計株式会社的注册商标。



- 感谢您购买本公司的电动牙刷。
- 在使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书。
- 本说明书兼保修卡使用，请妥善保管。

目 录

前言	1
安全注意事项	2
产品结构	3
使用说明	4-6
故障排除及维护保养	7
产品规格	8-9
产品环保信息	10-11
保修卡	12-13

前 言

- 此产品仅限用于说明书中描述的用途，切勿用于除牙齿护理以外的其他用途。
- 确保产品放在儿童不能触及处。
- 肢体不健全、感觉或精神上有障碍、或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）等，请在监护人指导下使用。
- 如果您在前2个月中曾做过口腔或牙龈手术，请在使用产品前先咨询您的牙医。
- 切勿大力将刷毛压在牙齿或牙龈上，也不能长时间刷同一个位置。
- 切勿使用稀释剂、苯或酒精来清洁牙刷，以免引起零部件故障、开裂或变色等问题。
- 请使用手指头部来按压按钮，用手指甲会损坏按钮保护皮。
- 切勿自行拆卸、修改或维修，否则易引发意外或麻烦。
- 谨防跌落或粗暴使用牙刷。

	注意！查阅随机文件
	一般指示
	禁止
	禁止分解
 纸	包装材料的回收标识

安全注意事项

为了防止产品在使用过程中对您和他人造成伤害或财产损失，以及保持产品长期的良好性能，使用时请务必遵守下列事项。

关于产品的使用安全

⚠ 注意

● 请将产品放在婴幼儿接触不到的地方





⊘ 勿将产品加热或投入火中，以免发生爆炸



产品结构

● 产品

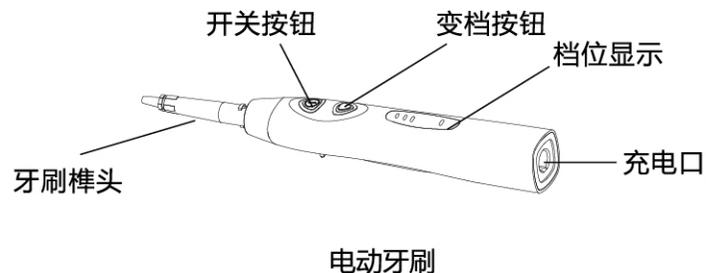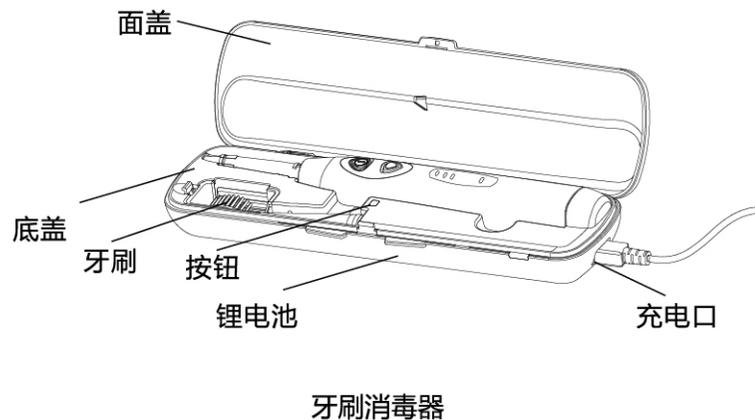

● 初次使用前，请确认以下物品均已齐全

1. 牙刷消毒器、电动牙刷 EHS520
2. 使用说明书

使用说明

● 电动牙刷使用方法

- 1、沾湿刷毛并挤上适量牙膏，将牙膏均匀涂在刷头上。
- 2、将口腔分为四个区域，把电动牙刷刷头接触口腔其中一个区域的牙面。（见图2）
- 3、按动开关，以轻微上下摆动的方式由外到内移动牙刷，对每个区域的牙面的内、外及咀嚼面各清洁10秒，共30秒。
- 4、当一个区域刷牙时间达到30秒时，电动牙刷会抖动提醒您移向下一个区域继续清洁。
- 5、按照以上方法逐步对口腔四个区域进行清洁，当达到科学标准刷牙时间2分钟时，电动牙刷会自动关闭，刷牙结束。
- 6、本产品上设有开关按钮和变档按钮，开关按钮控制产品的开启和关闭；变档按钮控制产品刷牙模式的转换，本产品具有三档模式转换，Super,Normal,Massage,分别对应清洁模式，轻柔模式，按摩模式。


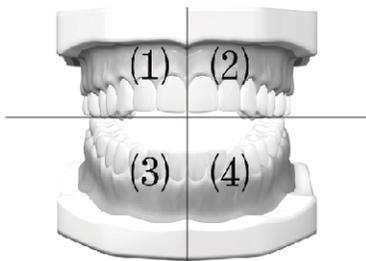


图2


使用说明

● 电动牙刷刷头更换方法

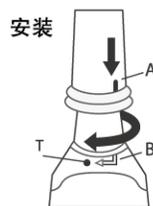

安装：

将新的牙刷头按A的方向套下，使A与B对齐，再向箭头方向拧紧至A与T对齐。

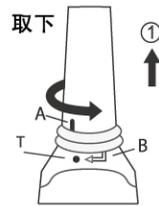

取下：

将牙刷头按箭头方向拧至A与B对齐，再向①的方向取下

● 电动牙刷充电说明

- 1、将电动牙刷放入消毒盒内部，请注意按照外形正确放置，否则可能影响充电效果。
- 2、插入USB数据线供电，此时电动牙刷上的充电指示灯亮，指示电动牙刷正在充电，电充满后，电动牙刷上的充电指示灯灭。
- 3、每次充满电，可使用约25天(每天2次，每次使用2分钟，室温22℃)。

使用说明

● 消毒器使用方法

- 1、将牙刷头放入消毒区域，盖上面盖后就会自动开启杀菌，6-8分钟后杀菌自动关闭。
- 2、在消毒状态下打开面盖将关闭消毒。

● 消毒器内置锂电池充电方法

- 1、插入USB数据线供电，此时产品上的充电指示灯亮，指示电池正在充电，电充满后，充电指示灯灭。

● 注意：

- 1、首次使用或者长时间未使用灯管可能存在慢启动或者不工作现象，可能是内置锂电池电量不足引起，是正常现象。
- 2、如灯管偏暗或者不亮，可能是电池电量不足，请及时充电。
- 3、消毒时请将刷毛朝向灯管。
- 4、电动牙刷充电时请正确放置手柄，手柄正面朝上，完全卡入限位区。

故障排除及维护保养

● 故障排除

原因	措施
产品不工作	电量可能过低，请及时充电
产品工作不顺畅	
充电后使用时间短	确保充电器正确连接，本品充满电时间为16小时左右，请确保已充满

● 维护保养

1. 使用前，请先将刷毛用清水清洗，切记使用前断开充电设备。
2. 使用后，请将牙刷用清水冲洗干净，并放置在通风干燥处。
3. 为达到最佳清洁效果，建议每三个月更换一次刷头（更换时间可根据牙刷使用频率和使用方法而变）。
4. 如果产品有损坏迹象，请尽快更换。

产品规格

项目	参数
产品名称	电动牙刷
型号	EHS520
产品尺寸	222mmx25mmx25mm
重量	0.054kg
额定电压	DC 3.7V
额定功率	1W
锂电池容量	260mAh
震动频率	≥35000次/min
使用环境	0~50°C
材质	ABS+TPE+杜邦刷毛
公称丝径	深蓝色刷丝径：Ø0.152mm
	浅蓝色和白色刷丝径：Ø0.178mm

上述规格若因性能改进而发生变更，恕不另行通知。

产品规格

项目	参数
产品名称	牙刷消毒器
产品尺寸	225mmx67mmx36mm
锂电池容量	600mAh
额定电压	DC 5V
额定功率	2W
紫外线强度	≥230μW/cm ²
紫外线灯管寿命	≥8000小时
电池使用时间	30次（锂电池充满）
材质	ABS+石英灯管

上述规格若因性能改进而发生变更，恕不另行通知。

产品环保信息

1. 有害物质名称及含量状况

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板	×	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○
紫外线灯管	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品环保信息

2. 电子电器产品有害物质限制使用标识

本产品的环保使用期限标识为：。标识中央的箭头围住的数字为环保使用年限，表示环保使用期限是10年。

本产品的生产日期请见产品铭牌。

请遵守关于该产品的安全或使用上的注意事项，从生产日期算起的该年限内使用不会对人体健康和环境带来不良影响。

保修规定

● 保修规定

即使在保修期间内，但出现以下状况均需客户承担修理费用。

- ①由于错误使用或拿取导致的故障或损伤。
 - ②由于保管不当或由于使用这责任导致的故障或损伤。
 - ③由于火灾、地震、水灾、异常电压、使用指定电源之外电源或其他天灾地变或撞击导致的故障或损伤。
 - ④保修卡里面没有提到的保修范围。
 - ⑤保修卡上面写的获赠日、保修期限等写得不够详细或有被修改过的痕迹。
 - ⑥使用后的外装面有伤、破损或需要对外装部品、附带品进行更换时。
- ※在把产品带到指定维修中心进行修理时所产生的各种费用均由客户承担。

- 本保修单只发行一次，请妥善保管。

保修卡

保修卡

CITIZEN

非常感谢您购买本公司的电动牙刷。在您按照使用说明书正确使用本产品的期间，如果发生故障而又在保修期内，请带上本保修卡和产品到指定维修中心，进行修理和调整。※在修理期间如有需要，保修员有可能会写上相关信息在保修卡上。

产品名称	电动牙刷	
型号	EHS520	产品编号/批号
客户姓名	电话	
住址		
获赠日	年	月 日
保修期限 自获赠日起一年		

售后服务中心：鑫爵贸易（上海）有限公司
售后服务地址：上海市长宁区中山西路1055号A座7楼701室
售后服务热线：400-921-7778
服务时间：周一至周五（9:30-12:00;13:30-17:00），节假日除外。

CITIZEN（西铁城）是西铁城时计株式会社的注册商标